

チューブ式ローラーポンプ

RP-M5F

小型

培地液・試薬・飲料・化粧品液・研磨液・酸/アルカリ液の移送に

**選べる3種類の
可変範囲！**



特長

- 小型軽量の卓上型タイプ。
- 微量吐出に適したポンプです。
- ポンプケースはオーステナイト系ステンレスSUS304製で耐腐食性に優れています。
- チューブ交換が容易にできます。外す部品はチューブのみでコンタミを防ぎます。
- クリーンルーム内での分析・検査装置、および培地液移送にも安心してご使用いただけます。

カスタム対応とデモ機

- 外部信号制御・タイマー制御等、お客様のニーズに最大限お応えします。
- 標準品のデモ機がございます。ご購入前のご検証にお役立てください。

ご注文の際は「流量No.」、「チューブ種」、「電源仕様」をご明記下さい。

MODEL RP-M5F

仕様

モータ	ステッピングモータ KP4P15G
最大使用圧力	0.02MPa ※チューブ種・寸法による
電源(※)	単相100V(50/60Hz)/0.08A
寸法	82W×150D×120H(mm)
重量	850g

※電源仕様:単相200Vも製作可

吐出量(ご用命時に流量No.をご明示ください)

流量No.	チューブ寸法	可変範囲(mL/min)
No.1		0.04~2.0
No.2	2.0×4.0(mm)	0.1~5.0
No.3		0.2~10.0

適用チューブ(ご用命時にチューブ種をご明示ください)

高強度シリコン/標準	2.0×4.0mm
ファーマドBPT	

付属品

セットチューブ	1本(継手付)
チューブ	1m(高強度シリコンのみ)
取扱説明書	1部

ポンプ部品の特長

- 耐薬品性に優れたローラー。
- 潤滑性、強度に優れたチューブ受皿。
- チューブ受皿に弊社独自スプリング方式を採用しており、押圧調整が不要です。

チューブの特性 ※送る液種によってチューブ材質の選定が必要となります。


① 高強度シリコン

弊社オリジナルのローラーポンプ用シリコンチューブです。食品衛生法適合で最高使用温度200℃。オートクレーブ滅菌が可能です。

② ファーマドBPT

優れた耐酸性、耐アルカリ性を有した長寿命のチューブです。最高使用温度135℃、オートクレーブ滅菌も可能です。USPクラスVIに適合しています。

外観寸法図

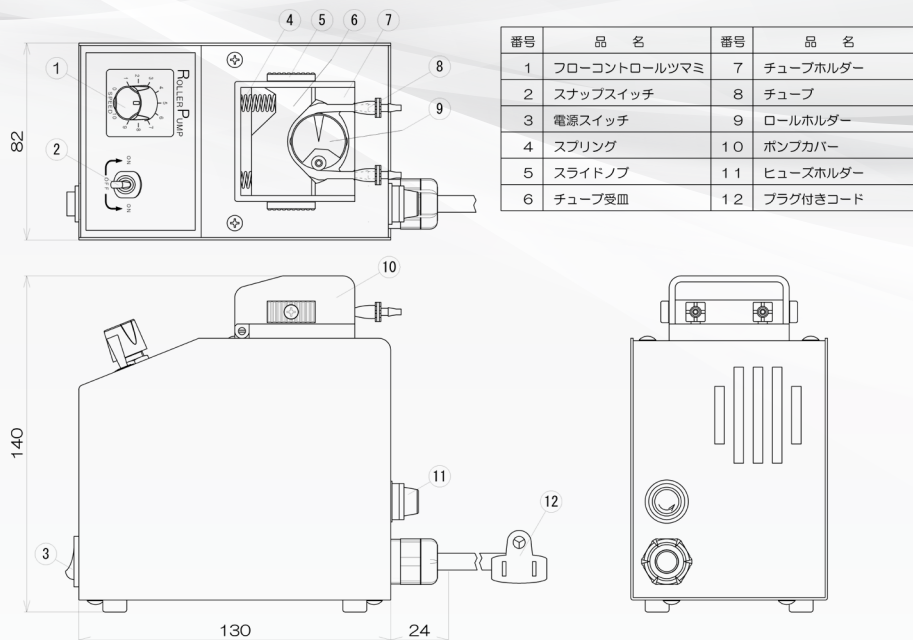

組立図・取扱説明書などは、ホームページよりご確認ください。

三洋テクノス株式会社 ポンプ事業部



〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-19-3 三洋テクニカルセンター内
TEL: 048-280-1670 FAX: 048-280-1671

Sanyo Trading Group

URL <https://sanyo-technos.com>

Email info-sales@sanyo-technos.com

