

チューブ式ローラーポンプ



RP-PJSB

小型

培地液・試薬・飲料・化粧品液・研磨液・酸 / アルカリ液の移送に

押圧調整不要!



特長

- 小型軽量の卓上タイプ。
- 低速での真空ポンプとしても使用でき、ポンプ停止時はバルブ効果もあります。
- 持ち運びが容易で、さまざまな場所でご使用できます。
- 研究・分析・検査装置、シリコンウエハー用研磨液滴下等、さまざまな機器との組み合わせでご使用ください。

カスタム対応とデモ機

- 外部信号制御・タイマー制御等、お客様のニーズに最大限お応えします。
- 標準品のデモ機がございます。ご購入前のご検証にお役立てください。

ご注文の際は、「チューブ種」、「電源仕様」をご明記下さい。

MODEL RP-PJSB

仕様

モータ	ステッピングモータ PK243-02A
ポンプ回転数	3~200rpm
吐出量	1.5~90.0mL/min
最大使用圧力	0.05MPa
電源(※)	AC100V/AC200V(47~63Hz)・0.2A
寸法	211D×120W×115H(mm)
重量	1.5Kg

※単相200V仕様は電源コードのプラグ先が付いていません。

適用チューブ

ファーマドBPT/標準	4.0×6.0mm
高強度シリコン	4.0×6.0mm

付属品

セットチューブ	2本(継手付)
取扱説明書	1部

ポンプ部品の特長

- 耐薬品性に優れたチューブ受皿。
- 耐摩耗性、耐薬品性、耐疲労性に優れたローラー。
- ステッピングモータ搭載で、小型で高トルク。
- チューブ受皿に弊社独自スプリング方式を採用しており、押圧調整が不要です。

チューブの特性 ※送る液種によってチューブ材質の選定が必要となります。

① ファーマドBPT


優れた耐酸性、耐アルカリ性を有した長寿命のチューブです。最高使用温度135℃、オートクレーブ滅菌も可能です。USPクラスⅥに適合しています。

② 高強度シリコン

弊社オリジナルのローラーポンプ用シリコンチューブです。食品衛生法適合で最高使用温度200℃。オートクレーブ滅菌が可能です。

外観寸法図

番号	品名	番号	品名
1	PJストレートチューブコネクタ	7	ゴム足
2	チューブ	8	PJ上カバー
3	ロールホルダPA	9	PJ下カバー
4	フローコントロールツマミ	10	ボックスカバー
5	切替スイッチ	11	ヒューズホルダ
6	電源スイッチ	12	電源コード 1.8m

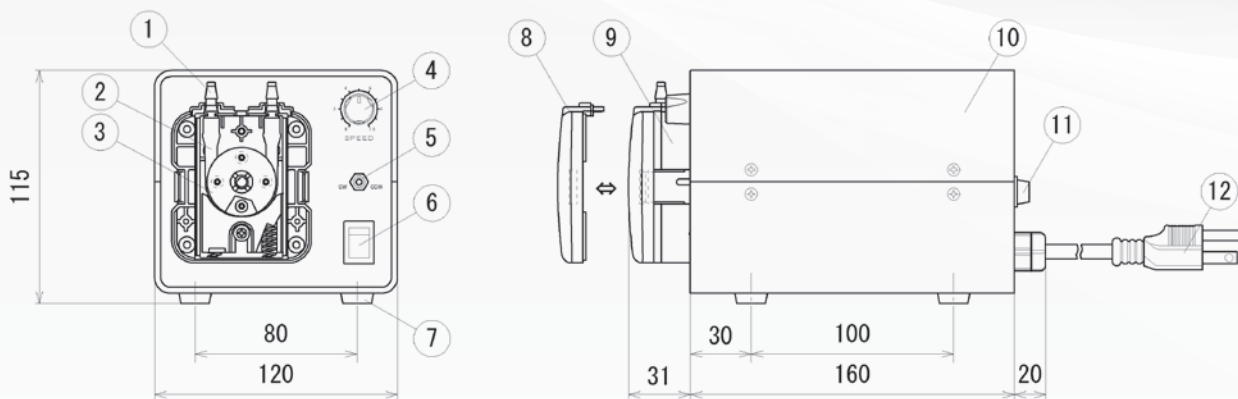

組立図・取扱説明書などは、ホームページよりご確認ください。

三洋テクノス株式会社 ポンプ事業部



〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-19-3 三洋テクニカルセンター内
TEL: 048-280-1670 FAX: 048-280-1671

Sanyo Trading Group

URL <https://sanyo-technos.com>

Email info-sales@sanyo-technos.com

